



Appearance patent
201530335447.X



Utility model patent
201520672667.6

・電流磁気とイオンリードの働きで、スキンケアエッセンスを5mm以下の深部まで導き、肌細胞を活性化させ、目もとの潤いを急速に取り戻し、若々しい肌へと導きます。

・青色光波と赤色光波は効果的に肌の奥まで浸透し、毎日の使用で効果的に肌の弾力性を高め、目の周りのメラノーマを減らします。

・選択のためのデュアルモード

a) 高振動周波数の「マッサージ」モードは、肌を生き生きと呼び、疲労を和らげ、肌が毒素を排出し、浮腫を解消し、目の輪郭と曲線を再形成し、肌をしっかりとした弾力的にします。

b) 「磁気熱リフティング」モードでは、高振動周波数に加えて、45°Cの温度でより多くの磁気熱療法があり、加熱に3秒しかかからず、目を持ち上げて老化の兆候を修復することができます。


・目の使用のための特定のデザイン、あらゆる角度でシームレスに閉じる、それ顔にも使えます。

・USBケーブル充電、安全性と環境保護。


・ミニ & ポータブル、いつでもどこでも使用できます。

人間工学に基づいた人間工学設計により、使用時に気分が良くなります。

ウィターグローアイリンク
リムバー4

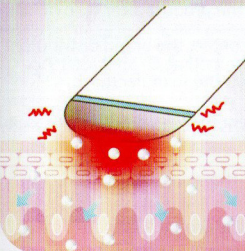

手で使用する

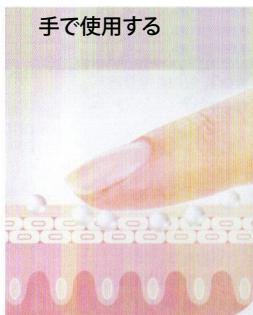

アイサークルの使い方

1. スキンケア製品をアイサークルに適用します
2. オン/オフを押します。指がインテリジェントセンシングラインに接触し、マッサージヘッドが目の周りの皮膚に接触すると、製品が起動します。
3. マッサージヘッドを使用して、目元からこめかみまで肌をやさしく持ち上げます。
4. 肌をやさしく押してマッサージします 吸収を早めます。
5. マッサージモードまたは磁気を選択します 個人に応じたヘストリフトモードを提供します。



フェイシャルの使い方

1. スキンケア製品を顔に塗ります。
2. 指が触れたときにON/OFFを押します
インテリジェントセンシングラインとマッサージヘッドが目の周りの皮膚に接触すると、製品はインテリジェントに振動を開始します。
3. マッサージヘッドを使用して、額の皮膚をやさしく持ち上げて、額のしわ。
4. 唇のしわと唇の小じわを持ち上げます。
5. マリオネットラインを解消するためにマッサージします。
6. 周囲のリンパをマッサージする類、そして体を改善する循環機構。



お手入れ方法

1. オン/オフを押すと、デバイスがオフになります。
2. 製品をクレンジングクロスで拭き、使用しないでくださいの洗剤。
3. カバーを閉じ、製品を乾燥した換気の良い場所に置きます。

注意事項

1. ご使用前に製品説明書をお読みにになり、将来の使用のために保管してください。
2. USBケーブル充電、低バッテリーステーションから飽和状態までの充電には約2.5時間必要です。フル充電すると、1~10時間連続使用できます。
3. 充電中は赤く点灯し、再充電すると充電状態を示します。消灯は充電が完了したことを示します。
4. 使用しない場合、製品は自動的にオフになります。